



تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster
شركة الصحة القابضة



شفط البلغم عن طريق الأنف والحنجرة

Aspiration of sputum through
the nose and throat

شفط البلغم عن طريق الأنف والحنجرة:

- ◆ هي أحد الطرق الأكثر شيوعاً لإزالة البلغم واللّعاب وإفرازات أخرى في مجرى التنفس .
- ◆ تستخدم طريقة شفط البلغم عند عدم قدرة المريض على إخراج البلغم عن طريق الفم .
- ◆ تتم عملية شفط البلغم عن طريق استخدام ضغط سلبي لتنظيف مجاري التنفس للمريض لتسهيل عملية التنفس .
- ◆ الفئة العمرية المنصح بها لمستخدمي شفط البلغم عن طريق الأنف مروراً بالحنجرة ومن ثم إلى مجرى التنفس هم: الأطفال أو المصابين بالأمراض العصبية

متى يجب ان أشفط البلغم إلى المريض

في حال سماع صوت البلغم في الصدر
أو في الجزء العلوي من مجرى التنفس

ارتفاع معدل التنفس إلى المريض


انخفاض نسبة الأكسجين

تغير لون جلد المريض

تعليمات قبل البدء بعملية شفط البلغم

- 1 مراقبة العلامات الحيوية مثل: (نسبة الأكسجين أو ضربات القلب)
 - 2 تزويد المريض بالأكسجين الكافي قبل بدء عملية الشفط
- بالخصوص (الأطفال)

الأدوات المستخدمة إلى عملية شفط البلغم

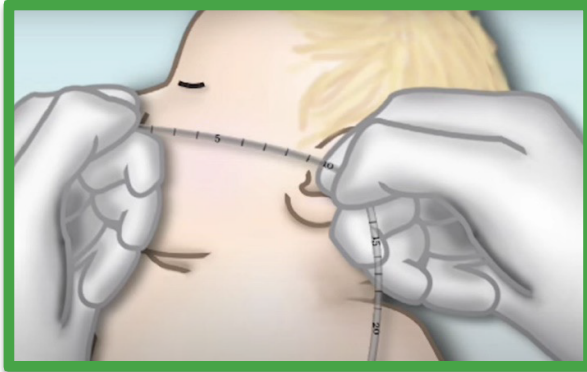

أنبوب شفط
البلغم يحدد
المقاس على
أساس حجم
المريض

محلول
ملحي

جل
معقم

جهاز
شفط
البلغم
المنزلي

قفازات

كيفية شفط البلغم

- 1 غسل اليدين بالماء والصابون
- 2 اختيار القياس المناسب للأنبوب شفط البلغم
- 3 قياس عمق الأنبوب المدخل من لحمة الأذن إلى منتصف الأنف (كما هو موضح في الصورة)
- 4 ضبط الضغط المناسب للمريض (الجدول أدناه يوضح الضغط 10. المناسب إلى كل فئة عمرية)

الضغط	العمر
٦. -٨.	حديثي الولادة
٨. -١٠.	الرضع
١٠. -١٢.	الأطفال
١٠. -١٥.	البالغون

5 وضع المريض في وضعية (شبة الجلوس) ما بين 15-45 درجة

6 ارتفاع مقدمة السرير

7 ضع بعض من الجل في مقدمة أنبوب الشفط

8 ابدأ بإدخال أنبوب الشفط في أحد فتحات الأنف (في حال

وجود صعوبة في ادخال الأنبوبة اختر الجهة الأخرى لتجنب

الإصابات)

9 ابدأ بإغلاق فتحة الضغط بشكل متقطع وسحب الأنبوب

إلى الخارج

10 كامل عملية الشفط يجب أن تكون بين 10-12 ثانية من إدخال

الأنبوبة إلى إخراجها

ماذا يُلاحظ بعد عملية شفط البلغم

1 تحسن صوت التنفس عند المريض

2 تحسن نسبة الأكسجين في الدم

3 انخفاض معدل التنفس للمريض

جهاز شفط البلغم المنزلي المقدم من الطب المنزلي

ما هو جهاز شفط البلغم؟

يعمل الجهاز بالجهاز بالضغط السلبي لشفط البلغم والإفرازات ويتميز الجهاز بخاصية الشحن الداخلي ليسهل التنقل فيه

ماذا تحتوي الحقيبة المقدمة من الطب المنزلي

- 1 تحتوي على جهاز الشفط
- 2 علبة شفافة لتجمع السوائل فيها
- 3 فلتر مع انبوب صغير
- 4 انبوب 6 (انش)
- 5 شاحن للبطارية الداخلية
- 6 شاحن للبطارية يوصل في السيارة

صور توضيحية لكيفية تركيب الجهاز



1 أوصِل الجهاز بالشاحن ومن ثم في مقبس الكهرباء (220)

2 ضع العلبة الشفافة في المكان المخصص لها في جهاز

الشفط (كما موضح في الصورة)

3 أوصِل الفلتر الخارجي مع الفلتر الداخلي

4 ومن ثم اوصِل الأنبوب الآخر في الجهة المقابلة

كيفية التأكد من ضبط الضغط

بعد توصيل الجهاز اضغط على زر التشغيل ومن ثم ضع أصبعك على مقدمة الأنبوبة وأنظر الى المؤشر حتى يتوقف

**حركة المؤشر مع عقارب الساعة لزيادة
الضغط وعكس عقارب الساعة لتقليل الضغط**

لأن الوعي وقاية

إدارة التثقيف الصحي

قسم الرعاية المنزلية للعلوم التطبيقية الطبية

HEM3.22.0001387

R2-CCCM-CPAVA-201125- MA



| Cluster2_Riyadh



| 8001277000 | إنتاج التواصل المؤسسي والتغيير